

GUIA DE INSTALACION Y DE UTILIZACION



¡ ENHORABUENA !

Acaba de adquirir la Wellbox®[S], una máquina de uso exclusivamente doméstico, y le damos las gracias! LPG, líder mundial en la Endermologie®, le permite beneficiarse en su propio hogar, de sus años de experiencia en estimulación celular. La Wellbox, producto derivado de las tecnologías profesionales LPG (Cellu M6®), reactiva de forma natural los procesos fisiológicos responsables de la delgadez y la juventud. En tan sólo unos minutos al día, la Wellbox revolucionará su vida diaria y reinventará sus hábitos de belleza.

Ahora sólo tiene que seguir las instrucciones proporcionadas en esta guía.

ÍNDICE	Certificado de garantía	3
	Normas de seguridad importantes	4
	Contraindicaciones.	5
	Precauciones de utilización	6
	Contenido del embalaje	7
	Descripción del aparato.	8
	Descripción del panel de control	9
	Descripción de los cabezales de tratamiento.	10
	Instalación	12
	Alimentación eléctrica.	13
	Puesta en marcha	14
	Mantenimiento	15
	Mantenimiento de los cabezales Roll	16
Mantenimiento de los cabezales Lift	17	
¿ Qué hacer si surge un problema ?	18	
Características técnicas	19	



Lea con atención esta Guía de instalación y de utilización, y conserve estas instrucciones para futuras consultas.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

del

WELLBOX LPG®

La presente garantía (la "Garantía") es aplicable en todos los países en los que el producto LPG® WELLBOX (el "Producto") sea vendido en el mercado por LPG® S.A. ("LPG®") o por un vendedor autorizado.


LPG® garantiza que el Producto, en el momento de su primera compra, no presenta ningún defecto de material, de diseño ni de fabricación a reserva de las disposiciones y condiciones que se indican a continuación:

1. La Garantía es válida para el comprador final del Producto (el "Cliente"). No limita de ningún modo los derechos del Cliente según las disposiciones imperativas de la legislación nacional aplicable ni los derechos del Cliente respecto al vendedor/distribuidor del Producto según el contrato establecido entre ellos.

2. La Garantía será válida siempre y cuando el Cliente presente junto con el Producto la prueba original de compra (es decir, la factura, el recibo, el comprobante de compra), el certificado de garantía entregado por un vendedor autorizado acompañado del comprobante, o la prueba de pago con tarjeta de crédito en el caso de que la compra se haya realizado por Internet. La prueba de compra debe indicar la fecha de la compra, la designación explícita del Producto y, cuando proceda, el nombre del vendedor autorizado y el número de serie. LPG® se reserva el derecho a rechazar la Garantía gratuita en el caso de que los documentos anteriormente mencionados no sean presentados o no muestren de manera completa o legible la información detallada.

3. La Garantía sólo es válida si el Producto es utilizado a título privado. Queda excluida en el caso de empleo a título profesional o de arrendamiento a título comercial del Producto.

4. El Periodo de Garantía es de 2 (DOS) AÑOS como máximo a partir de la fecha de compra del Producto a LPG® o a un vendedor autorizado por parte del primer Cliente (el "Periodo de Garantía"), sin que se pueda superar en este periodo el máximo de 500 horas de utilización, es decir 5.000 sesiones de 6 minutos.

Para comprobar el número de horas de utilización, apague el aparato, déjelo enchufado y pulse simultáneamente durante 2 segundos los botones Power (+), Time (-) y . Repita la misma operación para encender la pantalla.

5. Dentro del "Periodo de Garantía", LPG® reparará o sustituirá de manera gratuita el Producto defectuoso según su propio criterio y el stock disponible. LPG® entregará al Cliente bien el Producto reparado bien otro Producto en buen estado de funcionamiento. Todas las piezas u otro tipo de material que hayan sido reemplazadas pasarán a ser propiedad de LPG®.

6. No se prolongará ni renovará el "Periodo de Garantía" de un Producto reparado o reemplazado.

7. La Garantía se aplica a los defectos que surjan en el marco de una utilización del artículo de conformidad con la guía de instalación y de utilización. No cubre el mantenimiento ni la reparación o el reemplazo de piezas que hayan sido

motivados por el deterioro normal o por envejecimiento natural del Producto. Asimismo, la Garantía no se aplica especialmente si :

a. El defecto ha sido provocado por el hecho de que el Producto haya sido sometido: a una utilización en contradicción con esta guía de instalación y de utilización, a un trato brusco, a una exposición a demasiada humedad, a condiciones térmicas o de entorno extremas o a cambios bruscos de estas condiciones, a una exposición a la corrosión, a la oxidación, a modificaciones o conexiones no autorizadas, a reparaciones efectuadas por reparadores no autorizados o por el Cliente mismo, a reparaciones efectuadas con piezas de repuesto no autorizadas, a una mala utilización, a un tipo de alimentación eléctrica no adaptada, al incumplimiento de las instrucciones de montaje, a una instalación errónea, a un accidente, a las fuerzas de la naturaleza, al contacto con líquidos, a la acción de productos químicos y a cualquier otro acto razonablemente fuera del control de LPG®.

b. LPG® o el vendedor autorizado del Producto no han sido informados del defecto por el Cliente en los treinta (30) días siguientes a la aparición del defecto durante el "Periodo de Garantía" ;

c. El Producto no ha sido entregado a LPG® o a un vendedor autorizado en los sesenta (60) días siguientes a la aparición del defecto durante el "Periodo de Garantía" ;

d. El número de serie del Producto o cualquier otro número de identificación se ha eliminado, borrado, estropeado, alterado o devenido ilegible ;

e. El defecto deriva del empleo del Producto con un accesorio que no ha sido fabricado o proporcionado por LPG®.

8. El Cliente se compromete a enviar el Producto en su embalaje original. LPG® no se responsabiliza del daño que pueda sufrir el Producto durante el transporte en un embalaje inadecuado. LPG® se reserva el derecho a solicitar al Cliente una participación a precio alzado en los gastos de envío del Producto.

9. La Garantía constituye el único recurso del Cliente contra LPG® y la única y exclusiva responsabilidad de LPG® con respecto al Cliente en cuanto a los defectos del Producto. La Garantía sustituye cualquier otra garantía o responsabilidad, sea de carácter oral, escrito, legal (en la medida en que no sea imperativa), contractual, casi delictiva u otros. LPG® no se responsabiliza de los daños o gastos incidentales, consecutivos o indirectos. En caso de modificación de la Garantía, es necesario el consentimiento previo por escrito de LPG®. La Garantía está sujeta a la legislación francesa, sin perjuicio de y en la medida en la que posibles normas imperativas de la legislación del domicilio o de la sede del Cliente no dispongan otra cosa.

10. Para activar la garantía de su Wellbox, visite la página web www.wellbox.com

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de instalar o utilizar el aparato, se recomienda encarecidamente leer atentamente las instrucciones descritas en esta sección.

PELIGRO: con el fin de reducir el riesgo de electrocución :

- Compruebe que la tensión de la red eléctrica se encuentra dentro del intervalo indicado en la unidad de alimentación del aparato (100-240 VAC). Debe conectarse a un enchufe que cumpla la normativa sobre electricidad en vigor. No enchufe la Wellbox a un enchufe múltiple. Después de cada utilización o antes de la limpieza, desenchufe el sistema de alimentación de la Wellbox.
- No utilice la Wellbox mientras se baña o se ducha. No ponga la Wellbox sobre una superficie húmeda o inestable, ni cerca de la bañera, la ducha o el lavabo. Utilice la Wellbox en un lugar seco. Evite que entre en contacto con el agua. No toque el aparato si se ha caído al agua. Desenchufe inmediatamente la alimentación eléctrica. No lave el tubo flexible con agua. No utilice la Wellbox al aire libre.
- No deje caer ni introduzca objetos en los orificios del aparato. No aspire sólidos ni líquidos con la Wellbox.

ADVERTENCIA: con el fin de reducir los riesgos de quemaduras, de incendio, de descarga eléctrica o de lesiones :

- No utilice el aparato debajo de una manta o similar. Se puede producir un calor excesivo que provoque un incendio, una descarga eléctrica o heridas personales.
- No utilizar el aparato si algún cable de alimentación o de conexión está dañado, si el aparato no funciona correctamente, si se ha caído, si ha sido dañado o si se ha caído al agua. En estos casos, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de LPG[®].
- No transporte o traslade el aparato sujetándolo por la tapadera, los cables o el tubo flexible, ni los utilice como asa para el transporte. No tire la Wellbox al suelo. No la sacuda ni le de golpes.
- No utilice la Wellbox si no ha conectado el tubo flexible a los cabezales. Mantenga los cables y el tubo flexible lejos de las fuentes de calor. No utilice el aparato si la temperatura ambiente es superior a 40°C.
- No utilice el aparato si ha utilizado anteriormente productos aerosoles (spray) o mientras se administra oxígeno.
- El aparato no debe quedar sin vigilancia mientras esté conectado. Para desconectar el aparato, pulse el botón de encendido y desenchufe el enchufe CC/CA de la toma de corriente.
- No abra ni desmonte el aparato.

CONTRAINDICACIONES

- No utilice la Wellbox en caso de contraindicaciones médicas ni sin haber leído con atención este capítulo y haber consultado las precauciones que figuran en esta guía.
- Si tiene alguna duda sobre la compatibilidad de su estado de salud con la utilización de la Wellbox, consulte a su médico.
- Se puede utilizar la Wellbox en todas las partes externas y sanas del cuerpo, excepto en los ojos, las orejas, la glotis y los genitales. No se debe utilizar la Wellbox en las mucosas, los pezones, la columna vertebral, ni en lunares sospechosos sin haber consultado antes a un médico.
- En caso de embarazo, no usar la maquina en las zonas del vientre y de la parte baja de la espalda. Algunas patologías pueden requerir el Consejo de su médico.

No utilice la Wellbox en caso de :

- Problemas epilépticos
- Trastornos de coagulación de la sangre
- Problemas cardíacos
- Dolores o rojeces
- Hormigueo en las extremidades
- Flebitis, varices o si se le ha practicado una intervención en las venas hace menos de dos meses
- Fiebre, infección, inflamación, dermatosis aguda, heridas abiertas, cicatrices recientes o cualquier enfermedad grave y/o evolutiva.
- En caso de medicación prolongada con medicamentos (antiinflamatorios, anticoagulantes, antibióticos o antiestamínicos), consulte a su médico antes de utilizar este aparato.
- La Wellbox no puede aplicarse en zonas hinchadas o enrojecidas.

Interrumpa el tratamiento en caso de dolor inexplicado en la zona de las pantorrillas. Si aparecen efectos secundarios asociados a los tratamientos Wellbox durante o después de la utilización, consulte a su médico y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de LPG[®].

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN

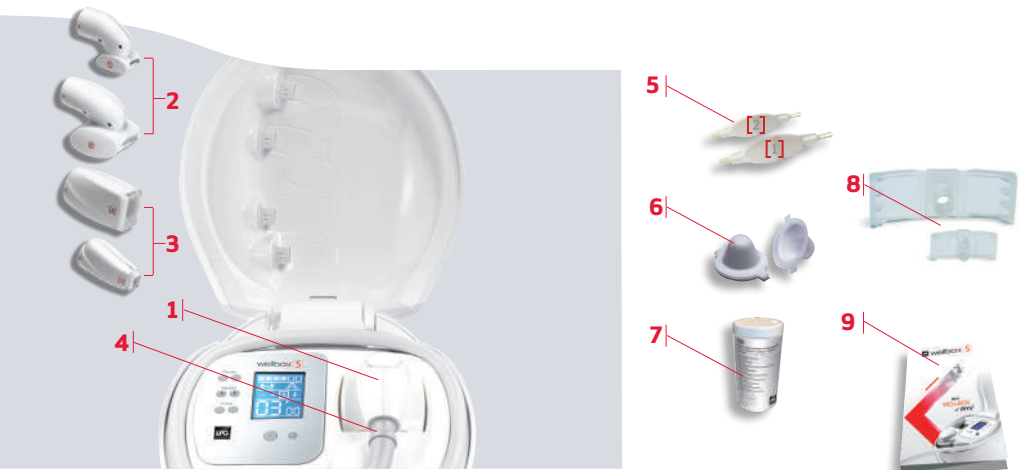
- No utilice la Wellbox en niños menores de 7 años y no permita que un niño menor de 11 años la utilice solo. Disminuya la intensidad a la hora de aplicar el tratamiento a un niño.
- Es necesario vigilar de cerca el aparato cuando es utilizado por, sobre o cerca de niños o de personas con discapacidad física o mental.
- La aplicación no debe en ningún caso provocar dolor ni dejar marcas; las posibles rojeces no deben durar más de unos pocos segundos ni dejar señales.
- No utilice nunca la Wellbox sin su filtro de protección.
- Utilice únicamente los cabezales de tratamiento y los accesorios proporcionados por la sociedad LPG[®].
- Esta maquina es para uso domestico exclusivo.
- No utilice detergentes, disolventes, productos químicos ni esponjas abrasivas para limpiar la Wellbox. Utilice las toallitas incluidas o toallitas impregnadas en una solución bactericida y fungicida.
- No utilice nunca la Wellbox sobre joyas o piercings.
- No utilice el aparato a una altura superior a 2500m.
- Es aconsejable poner el aparato en reposo 30 minutos entre dos sesiones de 30 minutos cuando se utiliza a una temperatura ambiente superior a 25°C.

La utilización habitual de la Wellbox permite sentirse mejor. Se recomienda no interrumpir el tratamiento durante un período de tiempo demasiado largo. Si no respeta las consignas y recomendaciones de utilización, corre el riesgo de no conseguir los resultados deseados. No utilice la Wellbox durante más tiempo del recomendado. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Los resultados pueden variar en función de su edad, su modo de vida (actividad física, alimentación, etc.) y su morfología.

Cuidado: esta estrictamente prohibido modificar su aparato sin la autorizacion de LPG.


CONTENIDO DEL EMBALAJE

La entrega de la Wellbox incluye todo el equipo necesario para la práctica regular de múltiples cuidados faciales y corporales.



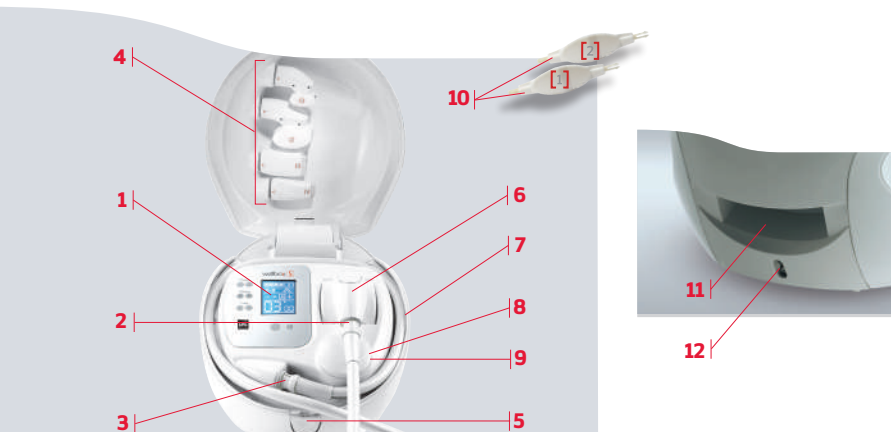
El embalaje contiene :

1. Un cabezal de tratamiento ③ con rodillos con motor.
2. Un juego de dos cabezales de tratamiento Roll ① ②.
3. Un juego de dos cabezales de tratamiento Lift [1] [2].
4. Un tubo flexible de conexión a los cabezales.
5. Dos herramientas para desmontar los cabezales con válvulas [1] [2].
6. Filtros de repuesto.
7. Toallitas de limpieza.
8. Válvulas de recambio para los cabezales Lift.
9. Esta guía de instalación y de utilización.

 *Conserve el embalaje original de la Wellbox durante todo el período de garantía. Cualquier posible devolución del aparato durante este período debe efectuarse en su embalaje original.*

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

La Wellbox es el primer aparato de uso doméstico basado en la experiencia de la sociedad LPG® en términos de estimulación celular. En la parte principal se encuentran el panel de control, el cabezal de tratamiento Roll ③ y el tubo flexible de conexión. La tapadera cuenta con un espacio para guardar los otros 4 cabezales y sirve para cerrar y guardar el aparato cuando no se está utilizando.






















1. Panel de control.
2. Tubo flexible desmontable para la conexión del aparato a uno de los cabezales de tratamiento (ver la página 103).
3. Punto de conexión del tubo flexible al aparato.
4. Espacio de almacenamiento de los cuatro cabezales ① ② y [1][2]: dos cabezales Roll y dos cabezales Lift.
5. Botón de apertura de la tapadera.
6. Cabezal de tratamiento Roll con motor ③.
7. Lugar de almacenamiento del tubo flexible.
8. Tapa de acceso al filtro de protección.
9. Filtro de protección al que se accede a través de la tapa (8).
10. Dos herramientas para desmontar los cabezales Lift.
11. Asa para el transporte.
12. Lugar de almacenamiento para la conexión eléctrica.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

El panel de control permite una fácil y práctica utilización de Wellbox. Cuenta con 8 botones y con una pantalla LCD en la que aparecen los distintos parámetros que se deben ajustar antes de empezar una sesión de tratamiento. Con los botones del panel de control, se puede:



1. Encender o apagar el aparato.
2. Iniciar, suspender o parar el tratamiento
3. Ajustar la potencia del tratamiento
4. Seleccionar el programa de tratamiento (continuo o con ritmo).
5. Determinar la duración del tratamiento en minutos.

- Para encender el aparato, pulse el botón .
 - Para iniciar, interrumpir, reanudar o anular un tratamiento, pulse .
 - Power : para ajustar la potencia, pulse los botones  o  en función del nivel que desee, de  a .
 - Select : para seleccionar el programa de tratamiento (continuo o con ritmo), pulse los botones  o .
- Existen 4 programas :
- | | |
|--|---|
|  Continuo (sin ritmo) |  ritmo medio |
|  ritmo suave |  ritmo elevado |
- Al pasar del programa con ritmo al programa continuo, la potencia disminuye automáticamente. Al pasar del programa continuo al programa con ritmo, la potencia no varía.
 - En las puestas en marcha siguientes se restablecen los valores de los parámetros "Power" y "Select" de utilización.
 - Time : pulse  o  para seleccionar la duración deseada (consulte el manual de instrucciones para determinar la duración que se adapta al tratamiento que desee. No supere en ningún caso la duración máxima de 30 min.).
En su primera utilización, el aparato indica por defecto 6 minutos .
 - Además, los símbolos  y  que aparecen en la pantalla, indican el(los) tipo(s) de cabezal de tratamiento compatible(s) con el tratamiento programado :
 Cabezal Roll  Cabezal Lift
 - En caso de no utilización durante más de 5 minutos, el sistema pasa automáticamente al modo "off".

 Cada vez que se pulsa un botón, suena un bip.

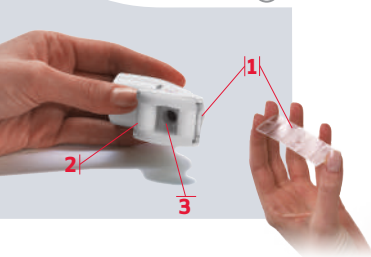
DESCRIPCIÓN DE LOS CABEZALES DE TRATAMIENTO

La Wellbox incluye un equipo completo de cinco cabezales de tratamiento. De este modo tiene la garantía de disponer en cada momento de la solución que mejor se adapte al tratamiento buscado y a la zona del cuerpo que va a ser tratada.

3 cabezales Roll ① ② ③

Cada cabezal Roll contiene juntas impermeables desmontables.



Cabezal Roll ①



1. Juntas impermeables desmontables.
2. Rodillos desmontables.
3. Cámara de tratamiento.

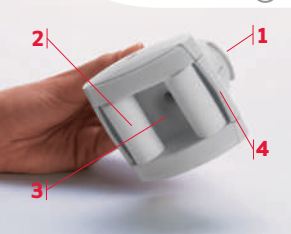
Cabezal Roll ②



1. Juntas impermeables desmontables.
2. Rodillos desmontables.
3. Botón de bloqueo.
Cuando el botón está pulsado , los rodillos están bloqueados (modo continuo), cuando no lo está , los rodillos pueden acercarse o alejarse (ritmo).
4. Cámara de tratamiento.




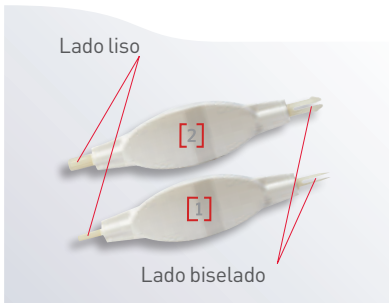
Cabezal Roll ③



1. Interruptor de inversión del sentido del giro de los rodillos a motor, que aparece indicado con una flecha luminosa.
2. Rodillos con motor.
3. Cámara de tratamiento.
4. Interruptor de inversión del sentido. (detrás de las piezas de protección).



DESCRIPCIÓN DE LOS CABEZALES DE TRATAMIENTO

2 cabezales Lift  [1] [2]Cabezal Lift [1]
con válvulas desmontables.Cabezal Lift [2]
con válvulas desmontables.2 Herramientas específicas
para desmontar cada cabezal.

INSTALACIÓN




Abra el aparato pulsando el botón de la parte delantera.



Coloque los cuatro cabezales en los lugares correspondientes situados en la tapadera. Existe un espacio específico para cada cabezal con un pictograma para que se pueda reconocer.

Para conectar el tubo flexible al aparato, haga lo siguiente:



Introduzca el tubo con la flecha  (en relieve) hacia arriba, tal como se indica en la fotografía.



Se puede conectar el tubo flexible por un extremo u otro indistintamente. Para desconectarlo, tire de él suavemente. No retuerza ni fuerce el tubo flexible.

A continuación, puede conectar el cabezal de tratamiento que desee al tubo flexible:



Elija uno de los cabezales y conéctelo al tubo flexible haciendo que las flechas situadas en el cabezal y el tubo flexible coincidan. Repita esta operación cada vez que desee cambiar el cabezal de tratamiento.



Después de la utilización, el tubo flexible se debe guardar fácilmente en el espacio previsto a este efecto tal como se indica en la figura.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Wellbox incluye una caja de alimentación con:

- Una unidad de alimentación eléctrica. Entrada 100-240 VAC, 50/60Hz
Salida 24 VDC
- Cuatro adaptadores eléctricos

Para conectar el aparato a la red eléctrica, haga lo siguiente:

Si los enchufes no corresponden, le rogamos contactar un electricista para buscar la solución adecuada



1. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la Wellbox.




2. Enchufe a continuación la unidad de alimentación a una toma de la red eléctrica.


La página de Internet mencionada en la caja está inactiva, visite la página web www.wellbox.com



Está prohibido y es peligroso desmontar esta caja o utilizar un tipo de alimentación diferente a la entregada con el aparato.











PUESTA EN MARCHA

 **Antes de utilizar el aparato, se recomienda leer atentamente las instrucciones de instalación.**



1. Después de conectar la unidad de alimentación (consulte la página 104), pulse el botón  para encender el aparato. El panel de control se ilumina. Antes de empezar el tratamiento y según las instrucciones esta guía de instalación y de utilización, es necesario seleccionar:


- la potencia (Power)
- el programa de tratamiento continuo o con ritmo (Select)
- la duración del tratamiento (Time)

Durante la primera utilización, todos los parámetros del aparato tienen el valor inicial:



- Potencia mínima de . Pulse  para aumentar la intensidad
- Programa de aspiración continuo . Pulse  para pasar a ritmo  /  /  (bajo / medio / elevado).
- Duración de 6' . Pulse  o  para seleccionar la duración necesaria para el tratamiento.


2. Seleccione el cabezal que desee utilizar y ajuste los parámetros de potencia, programa continuo o con ritmo y duración según las indicaciones de las fichas/ pósteres de protocolos.

3. Pulse  para iniciar el tratamiento. Si el cabezal Roll  está conectado al iniciarse el tratamiento, los rodillos giran hacia delante. Una flecha luminosa indica el sentido del movimiento del cabezal. Active el interruptor para invertir el sentido del movimiento. La flecha luminosa cambia también de dirección (consulte la página 101).

4. Es posible interrumpir el tratamiento en cualquier momento y reanudarlo cuando lo desee pulsando .

5. Para cerrar la Wellbox después de la utilización:

- Conecte el cabezal Roll  al tubo flexible
- Después enrolle el tubo flexible en el espacio previsto para ello (2 vueltas)
- Vuelva a colocar el cabezal Roll  en el lugar reservado para ello junto al panel de control. Coloque los demás cabezales en el lugar reservado en la tapadera superior. De este modo puede simplemente cerrar el aparato Wellbox.

 **La Wellbox pasa automáticamente al modo "off" en caso de no utilización durante más de cinco minutos.**

MANTENIMIENTO

⚠ Por razones de higiene y para mantener en buen estado de funcionamiento del aparato y garantizar su vida útil, es necesario limpiarlo con cierta regularidad. Desenchúfelo de la red eléctrica antes de iniciar cualquier operación de limpieza.

Cambio del filtro de protección

Su Wellbox cuenta con un filtro de protección que garantiza su buen funcionamiento. Cuando el filtro no permite seguir utilizando correctamente su equipo debe ser reemplazado. Se aconseja reemplazarlo una vez al mes.

Para cambiar el filtro:

Desenchufe la unidad de alimentación de la toma de corriente.



Gire la tapa 90° hacia la izquierda como se indica en la figura y estire hacia usted.





Quite el filtro usado desenganchándolo de la tapa y tírelo.



Coloque el nuevo filtro (ponga sólo uno cada vez), baje las 2 pestañas y vuelva a colocar la tapa.


MANTENIMIENTO DE LOS CABEZALES ROLL ① ② ③

 Por razones de higiene, la limpieza de los cabezales de tratamiento debe efectuarse regularmente, antes y después de cada utilización, con los cabezales desconectados y con la ayuda de toallitas impregnadas en una solución bactericida y fungicida.

Para limpiar los cabezales Roll  ① ② :

1. Coja el cabezal con los rodillos hacia usted.
2. Quite la junta impermeable de la cámara de tratamiento.
3. Limpie la cámara de tratamiento, la junta impermeable y los rodillos con una toallita.
4. Vuelva a colocar la junta impermeable en su sitio.
5. Vuelva a colocar los rodillos ejerciendo presión hacia el interior y hasta que oiga un clic.




Para limpiar el cabezal Roll  ③ :

1. Sujete el cabezal con una mano, desenganche las piezas de protección de cada uno de los rodillos, y límpielas con una toallita.
2. Quite las dos juntas impermeables sacándolas con cuidado de las muescas y límpielas con cuidado utilizando una toallita.
3. Limpie la cámara de tratamiento y los 2 rodillos con una toallita.
4. Enganche las juntas impermeables en las piezas de protección (la parte abierta en el interior). Introduzca el conjunto en el cabezal. Ejercer una leve presión sobre las muescas para volver a colocarlo todo en su lugar.

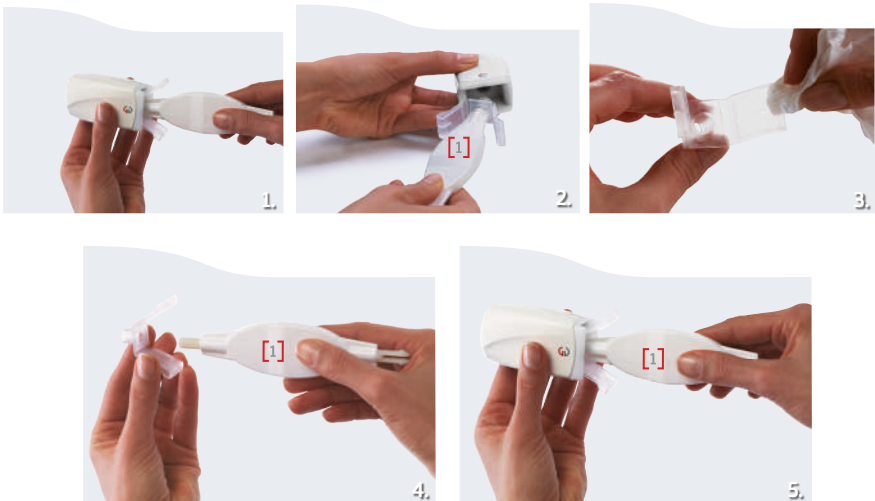


MANTENIMIENTO DE LOS CABEZALES LIFT [1] [2]

 Por razones de higiene, la limpieza de los cabezales de tratamiento debe efectuarse regularmente, antes y después de cada utilización, con los cabezales desconectados y con la ayuda de toallitas impregnadas en una solución bactericida y fungicida.

Para limpiar los cabezales Lift  [1] [2] :

1. Coja el cabezal Lift [1] o [2] y introduzca la herramienta [1] o [2], según el cabezal que desee desmontar, por el lado biselado, en el orificio de la válvula desmontable hasta que oiga un "clic".
2. Saque la herramienta del cabezal y sacará la válvula con ella.
3. Separe la válvula de la herramienta para limpiarla con cuidado utilizando una toallita.
4. Coja la herramienta por el lado liso y vuelva a colocar la válvula en la herramienta.
5. Introdúzcalo todo en el cabezal de tratamiento hasta que llegue al tope en el fondo del cabezal.



¿ QUÉ HACER SI SURGE UN PROBLEMA ?



Compruebe si ha seguido correctamente las precauciones de instalación y utilización (consulte las páginas 95, 96 y 97). En caso de que el aparato funcione de forma extraña, y antes de ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de LPG®, se recomienda realizar las siguientes comprobaciones:

- ¿Se han respetado las precauciones de utilización?
- ¿Está conectado el aparato a la unidad de alimentación?
- ¿Está conectada la unidad de alimentación según las instrucciones del aparato?
- ¿Se corresponde el adaptador de alimentación seleccionado a la normativa de su país?
- ¿Se ha activado el botón de encendido?
- ¿La Wellbox ha permanecido inactiva durante cinco minutos?
- ¿Se ilumina la pantalla?
- ¿Está limpio el filtro y bien colocado?
- ¿Está obturado el tubo flexible? ¿Está bien conectado?
- ¿Está correctamente conectado el cabezal de tratamiento al tubo flexible?
- ¿Las piezas de los cabezales de tratamiento (juntas impermeables, rodillos, válvulas) están bien colocadas, están limpias y pueden moverse?
- ¿Se puede activar fácilmente el botón de control del cabezal Roll ③ con motor?
- Por razones de seguridad, no desmonte ni la unidad de alimentación ni el aparato. De lo contrario, no se podrá aplicar el beneficio de la garantía.

Una vez efectuadas estas comprobaciones, si el fallo de funcionamiento persiste, llame al Servicio de Atención al Cliente de LPG® o a un distribuidor autorizado e indique el número de serie del aparato, que aparece en la etiqueta del código de barras situada debajo del aparato (por ejemplo, MM21 51571234) y el tiempo de funcionamiento en horas (consulte la página 94).

- **Servicio de Atención al Cliente de LPG®**
(número de teléfono gratuito en Europa, llamada gratuita desde un teléfono fijo)
00800 MYWELLBOX (00800 699 355 269)
- **www.wellbox.com** (sección de servicio de atención al cliente).
- **Para cualquier petición de información o reclamaciones por escrito:**
Servicio de Atención al Cliente de LPG® : tel.: 00800 699 355 269
(llamada gratuita en Europa únicamente o el +33 (0)4 75 78 68 99).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones (largo x ancho x alto) 350 x 300 x 250 mm
 Peso neto 7,5 kg
 Potencia absorbida..... 70 Watts
 Aparato de clase 3, duración máxima de utilización por sesión: 30 mn.

Etiqueta de identificación

Etiqueta de identificación "tipo" sujeta a modificación para tener en cuenta las evoluciones del aparato y del tipo de Wellbox. La etiqueta situada debajo de la Wellbox es la versión aprobada.



Descripción de los símbolos

	Corriente alterna
	Corriente continua
	Atención, consulte los documentos adjuntos
	Modo de espera, paso del modo de suspensión a encendido
	Advertencia
	Tensión peligrosa
	Consulte los documentos adjuntos
	No utilice el aparato al aire libre
	Este pictograma significa que el aparato salió al mercado después del 13 de agosto de 2006. De conformidad con la Directiva 2002/96/CE sobre residuos electrónicos, su aparato contiene componentes que no deben ser desechados en la basura doméstica y que deben ser recogidos por recogida selectiva, cuando el aparato llega al final de su vida, debe depositarlo a un punto de recogida adecuado o devolverlo a su distribuidor. Así usted estará realizando una acción por el medio ambiente y contribuirá a la conservación de los recursos naturales y a la protección de la salud humana.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas del aparato.

Lea con atención esta Guía de instalación y de utilización y consérvela.